

GUANTE LÁTEX DESECHABLE (CAJA C/100 PZAS)



TALLA	
202905400	CH
202905402	M
202905403	G

DESCRIPCIÓN

Guante de exploración natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" pulgadas de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable de látex natural, para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil.

COLOR

Blanco.

MATERIALES

Látex.

APLICACIÓN


Son utilizados en varias labores como medida de protección ante diferentes riesgos encontrados, como el que puede representar algún tipo de contagio.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

PUÑO	PALMA	DORSO	HILO
Rolado.	Látex.	Látex.	Látex.
VISUALMENTE			
No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, o fallas en el ensamble.			

DIMENSIONES

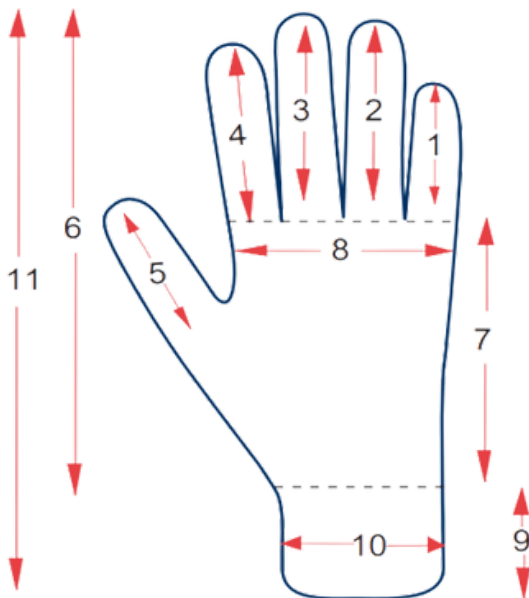

DIMENSIONES	CH	M	G
1. Dedo meñique	55 mm	55 mm	57 mm
2. Dedo anular	70 mm	70 mm	85 mm
3. Dedo medio	80 mm	80 mm	85 mm
4. Dedo índice	65 mm	65 mm	70 mm
5. Dedo pulgar	60 mm	60 mm	60 mm
6. Longitud	N/A	N/A	N/A
7. Longitud palma	N/A	N/A	N/A
8. Ancho de palma	80 mm	93 mm	100 mm
9. Longitud puño	N/A	N/A	N/A
10. Ancho puño	N/A	N/A	N/A
11. Longitud total	240 mm	240 mm	240 mm

CERTIFICACIÓN



UNE-EN 374-1:1995

NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **UNE-EN 374-1:1995**

Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.


GUÍA DE ELECCIÓN DE GUANTES

Para elegir el guante adecuado se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Las condiciones a las que será sometido el guante: temperaturas extremas, abrasión, corte, ambiente seco o húmedo, pinchaduras, etc.
2. Las características de acuerdo al uso que se le dará: sensibilidad al tacto, flexibilidad, agarre, resistencia, si debe de contar con refuerzo en algunas zonas o si debe ser más grueso para uso pesado.
3. Definir la longitud y forma del puño: más largo, ajustable, tejido, enrollado, etc.
4. El tamaño de la mano.
5. Si debe cumplir con alguna norma.

LARGO

El largo se determina dependiendo el uso y se toma desde la punta del dedo medio hacia el hombro.

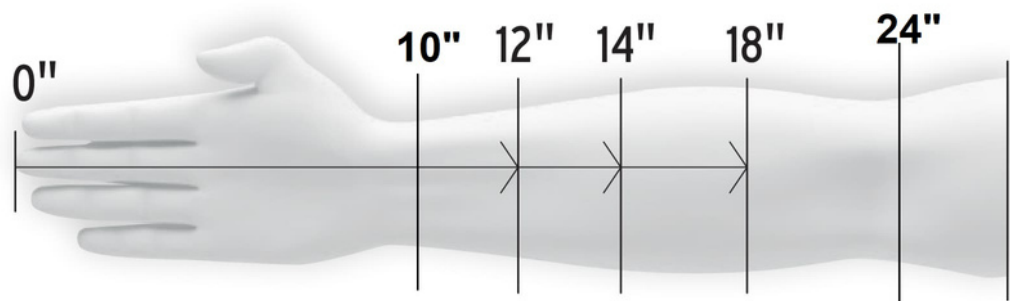

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.